


# 精准革新—AE Pro系列

十万分之一天平

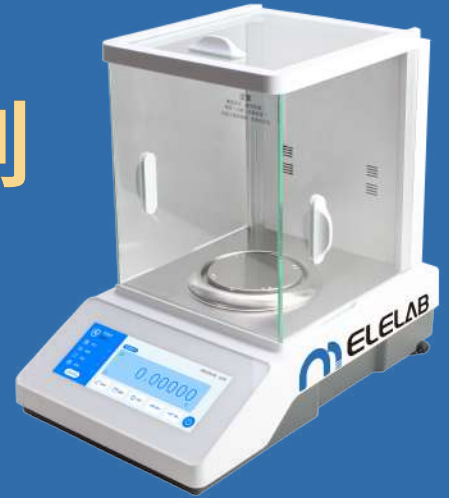

## 产品特点

6.8英寸全彩液晶触摸屏,屏幕亮度可调  
用户分级管理系统,为实验数据安全保驾护航  
电子水平泡,操作简便并实时监测报警  
超 overload 保护功能

## 实用功能

克/盎司/克拉等多种单位灵活转换  
计件、百分比称量一键完成  
检重和动物称重功能,拓宽使用场景  
自动故障检测,快速排查问题  
审计追踪功能,简化审计流程(可选配)

## 核心性能

高性能单片微处理器系统  
自动零位跟踪可调  
全量程范围去皮,称量精度可调  
四级防震设计,结构稳固

## 扩展配置

标配USB接口,方便连接外部设备  
内置蓝牙,并设立独立打印机接口  
去静电装置优化称量环境(可选配)



可设置采样间隔,打开自动保存按钮,观察称量物品动态变化趋势,及时发现数据变化中的异常和波动等情况

编号	称量模式	数据	用户	日期	备注
1	称量模式	520.00	admin	2025.05.30 09:10	maixiang
2	称量模式	520.01	admin	2025.05.30 09:12	maixiang
3	称量模式	520.00	admin	2025.05.30 09:15	maixiang
4	称量模式	300.01	admin	2025.05.30 10:20	maixiang
5	称量模式	220.00	admin	2025.05.30 10:32	maixiang

Buttons: 清空, << 上一页, 1/1, 下一页 >>, 审计, 打印

可实时查看称重数据(最多可储存3000条数据),同时可打印目标测试数据

型号参数	最大称量值(g)	可读性(mg)	校准方式	重复性(mg)	线性(mg)	秤盘尺寸(mm)
AE35i	31	0.01	内校	±0.02	±0.05	Φ85
AE55i	51	0.01	内校	±0.02	±0.05	Φ85
AE55D	51/120	0.01/0.1	内校	±0.1/±0.02	±0.2/±0.05	Φ85
AE85i	81	0.01	内校	±0.02	±0.05	Φ85
AE85D	81/220	0.01/0.1	内校	±0.1/±0.02	±0.2/±0.05	Φ85

